

躺著~就是它照顧您健康的時刻!

## 香柏樹遠紅外線溫熱墊

衛署醫器製字第002076號

豪華款 FIRB-5

標準款 FR001

輕巧款 FR002-2

# 使用手冊

★使用前請務必詳細閱讀本冊，以增加使用效果，維持產品品質。

## 目錄

### 目錄

#### 產品簡介

2

#### 產品規格/電源說明

3

#### 微電腦開關使用須知

各部名稱

4

開啟電源

調整時數

調整溫度級數

5

級數溫度對照表

#### 產品使用須知

只需溫熱(不流汗)

6

全身SPA(流汗)

輕巧款使用方式

7

#### 產品收納方式/清潔方式

豪華款FIRB-5

8

標準款FR001

輕巧款FR002-2

9

清潔方式

#### 特別注意事項

錯誤收納方式

10

錯誤使用方式

不適用者

#### 好轉反應

封底

# 產品簡介

## ● 香柏樹遠紅外線溫熱墊 2項頂級材質

### 1. 奈米級遠紅外線生化陶瓷材料

- 由工研院及多位博士所研發。產品專利名稱：改質型層狀黏土與含有此黏土之高分子複合材料；專利號碼：153292號
- 此專利材料可放射育成光波（4-14um遠紅外線）高達92%，可散發負離子約2,000~2,500個/立方公分。

### 2. 世界專利無磁波害熱超導系統

- 非傳統式線圈供熱，免除磁波害、耗電、耗氧、預熱時間過長等問題。
- 與中華衛星3號所用之熱超導體來自同一供應系統，具有高導熱性、穩定性、快散熱性、無磁波害、不耗氧、省電等優點。

## ● 香柏樹遠紅外線溫熱墊 10項獨家專業證照



1. 榮獲衛生署第二級醫療器材證照  
(許可證字號：衛署醫器製字第002076號)
2. 榮獲GMP醫療器材優良製造廠商證照  
(認可登錄號碼：衛署藥字第0950324940號)
3. 中華民國專利證書 (證書號碼：M260250)
4. 中國大陸專利證書 (專利號碼：733909)
5. 工研院認證 (4-14um遠紅外線放射率高達92%)
6. 中山科學研究院認證  
(4-14um遠紅外線放射率高達92%以上)
7. 榮獲國際發明獎 (無磁波害熱超導系統)
8. 榮獲國家發明獎 (無磁波害熱超導系統)
9. 國際電工法規安全認證 (通過105項電力測試)
10. SGS防火泡棉安全認證

# 產品規格/電源說明

## 1. 香柏樹遠紅外線溫熱墊 豪華款 FIRB-5



## 2. 香柏樹遠紅外線溫熱墊 標準款 FR001



## 3. 香柏樹遠紅外線溫熱墊 輕巧款 FR002-2



產品名稱	香柏樹遠紅外線溫熱墊 豪華款	香柏樹遠紅外線溫熱墊 標準款	香柏樹遠紅外線溫熱墊 輕巧款
型號	FIRB-5	FR001	FR002-2
規格	180x90x5 公分	180x90x2.5 公分	60x45x2 公分
淨重	8.2 公斤	5.5 公斤	1 公斤
功率消耗	160W±10%	160W±10%	13W±10%
適用電壓	110V, 50/60Hz		
輸出溫度範圍	室溫~41°C		
輸出溫度精確度	±3°C		
遠紅外線發射波長	4~14um (微米光波)		
負離子含量	2,000~2,500 個/立方公分		
微電腦定時功能	0.5~8 小時 溫度微調於 1~3級 時，使用時間最長可達 8 小時。 溫度微調於 4~5級 時，使用時間最長可達 1 小時。		
微電腦定溫功能	1~5級 1. 微 (約29°C) 2. 溫 (約32°C) 3. 中 (約35°C) 4. 高 (約38°C) 5. 強 (約41°C)		

# 微電腦開關使用須知

## 各部名稱

- 時間顯示
- 時間微調上鍵
- 時間微調下鍵
- 開關
- 溫度級數顯示
- 級數微調上鍵
- 級數微調下鍵



## 開啟電源

1. 接上電源，按「開關」鍵




2. 時間顯示為 0.5 小時  
溫度級數顯示為 1 級

## 調整時數



1. 按「時間微調」調整使用時數，按上鍵增加時數，按下鍵減少時數
2. 時數最長為8小時，最短為0.5小時
3. 溫度級數為1、2、或3級時，時間最長可設至8小時
4. 溫度級數為4或5級時，時間最長可設至1小時
5. 若時間設定為1小時，時間微調顯示會由59...58...57...1...至0時自動斷電
6. 若時間設定為0.5小時，時間微調顯示會由29...28...27...1...至0時自動斷電

## 調整溫度級數

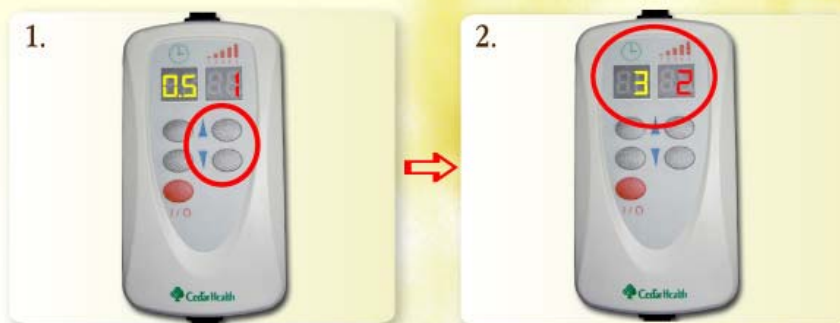

1. 按「級數微調」調整溫度級數，按上鍵增加溫度級數，按下鍵減少溫度級數
2. 請按照「級數溫度對照表」調整適合的溫度級數

## 級數溫度對照表

級數	1	2	3	4	5
溫度(約)	29°C	32°C	35°C	38°C	41°C
使用時間	0.5~8小時	0.5~8小時	0.5~8小時	0.5~1小時	0.5~1小時

## 特別叮嚀

1. 微電腦開關應隨時保持通風透氣。請勿置於溫熱墊上及枕頭下，以免受熱。
2. 每次使用後，請切斷電源，並拔掉插頭。
3. 若將溫熱墊溫度設至第一級（29°C）時卻沒有增溫，可能是室內溫度已經高於29°C。請將溫度級數調至2級以上，產品才會開始提供溫熱效應。
4. 若將溫熱墊溫度設至第二級（32°C）時卻沒有增溫，可能是室內溫度已經高於32°C。請將溫度級數調至3級以上，產品才會開始提供溫熱效應。

# 產品使用須知

## 只需溫熱 (不流汗)

豪華款 標準款



1. 溫熱墊上請鋪上大毛巾或床單，以保持產品清潔與衛生
2. 開啟溫熱墊開關
3. 設定溫度級數為1, 2, 或3級 (依個人需要)
4. 設定時間為0.5~8小時 (依個人需要)
5. 使用前後請喝至少300cc溫開水

## 全身SPA (流汗)

豪華款 標準款



1. 溫熱墊上請鋪上大毛巾或床單，以利吸汗，並保持產品清潔與衛生
2. 開啟溫熱墊開關
3. 設定溫度級數為4或5級，設定時間為0.5~1小時 (依個人需要)
4. 使用毛巾或被子覆蓋於身上，產生溫室效應，以利排汗
5. 使用前後請喝至少300cc溫開水

## 特別叮嚀:

1. 每次使用溫熱墊後，請隔10分鐘後再使用，以延長產品使用壽命
2. 每次全身SPA完後請更換大毛巾或床單，以避免溫熱墊受潮或浸水

# 輕巧款使用方式

## 1. 坐著時



## 2. 躺著時



## 3. 側睡時



## 產品收納方式

豪華款 FIRB-5 / 標準款 FR001



1. 背面朝上
2. 將溫熱墊的頭部（含微電腦開關的一方）往上摺
3. 將溫熱墊的尾部摺於頭部之上（呈二摺狀）
4. 放入收納袋中

**特別叮嚀：**

如非必須，  
請勿經常摺疊溫熱墊，  
應盡量保持平整

## 清潔方式

- 本產品請勿浸水，外套可以乾洗，內層請用乾布擦拭  
使用前請鋪上大毛巾或床單，以保持溫熱墊的清潔與衛生



8

## 輕巧款收納方式

輕巧款 FR002-2



1. 背面朝上
  2. 對折
  3. 放入收納袋中
- 此收納袋為贈品（送完為止）。

## 清潔方式

- 本產品請勿浸水，外套可以乾洗，內層請用乾布擦拭  
使用前請鋪上大毛巾或床單，以保持溫熱墊的清潔與衛生



9

## 特別注意事項

### ❌ 錯誤收納方式



1. 將溫熱墊擠壓於櫥櫃或儲藏室內
2. 將物品重壓於溫熱墊之上
3. 將溫熱墊錯誤摺疊
4. 將溫熱墊置於潮濕的環境中

### ❌ 錯誤使用方式

1. 讓動物或易尿床的孩童使用
2. 將溫熱墊放於不平整的表面上（容易傷害熱系統）
3. 使產品浸水
4. 與良好導熱材料一起使用
5. 在手術中一起使用
6. 在外套布未完全晾乾前使用
7. 連接不正確的電壓

### ❌ 不適用者

1. 嚴重心臟病患者
2. 裝置心律調整器者
3. 皮膚破潰、有發炎現象者
4. 體內體外出血者
5. 過敏發作或發疹者
6. 酒醉者
7. 發高燒者
8. 寵物

## 好轉反應

- 使用「遠紅外線溫熱療法」，有些人患處會更痛、更麻、更癢、更酸、臉紅、愛睏、出熱疹、皮膚紅腫、呼吸加快、心跳加快…等反應。

★ 一般說來，此為正常現象，稱為「好轉反應」。

- 「遠紅外線溫熱療法」的副作用很少，如有上述狀況時，可調低溫度，減少時間，通常幾天後狀況會消失。如症狀持續不退，請暫停使用。

- 如在使用及療效上有任何問題  
歡迎撥打免費服務電話：0800-821-800，由專人為您解說。  
或到我們的網站[www.cedarlife.com.tw](http://www.cedarlife.com.tw)，有豐富的醫療知識提供您參考。



地址：台北縣新店市民權路126號4樓

電話：0800-821-800，02-8218-8300

傳真：02-8218-8315

網站：[www.cedarlife.com.tw](http://www.cedarlife.com.tw)